

介護 貸与 保険

LOHATES

据置式手すり ロハテス



経済産業省
製造産業局長賞



- 本体重量は約1.8kgと軽量。使いたいところまで簡単に持ち運べます。
- グリップ部は肌触りの優しい天然木を使用しています。

最新情報は
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



マツ六
LOHATES(ロハテス)
ホワイト **貸与**

019-1550 LH-03WT-R
1台 **19,500円** (税抜き)

TAIS 01265-000269



マツ六
LOHATES(ロハテス)
ブラック **貸与**

019-1551 LH-03BK-R
1台 **19,500円** (税抜き)

TAIS 01265-000270



LOHATES用オプション

※漆LOHATESにも使用可能です。



ブラウン



グレー



ブラウン



グレー

マツ六 LOHATES用トレイ

商品コード	品番	色	価格
019-1504	LH-01T-BN	ブラウン	1個 4,000円
019-1505	LH-01T-GY	グレー	(税抜き)

●材質:ナイロン ●耐荷重:3kg

マツ六 LOHATES用マガジンラック


商品コード	品番	色	価格
019-1506	LH-01M-BN	ブラウン	1個 4,000円
019-1507	LH-01M-GY	グレー	(税抜き)

●材質:綿 ●耐荷重:3kg

共通仕様

- 材質:手すり/天然木、フレーム/スチール、足部/EPDM
- 重量:約1.8kg
- 最大使用者体重:100kg

寸法図

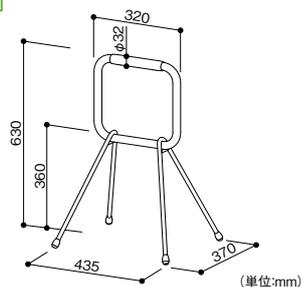


HOW TO USE (使い方)

椅子からの立ち上がり

手すりの位置がひざ頭の少し前になるようにLOHATESを置いてください。

胸体の真横に置くと立ち上がりにくいので注意してください。

足を後方に引き、前傾姿勢となった状態でLOHATESを下に押しながら立ち上がります。

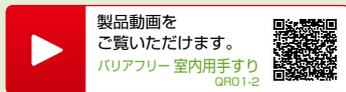

製品動画を
ご覧いただけます。
バリアフリー 室内用手すり
QR01-2

Webサイトでは、LOHATESの効果的な使い方について動画で解説しています。

